

HU

Leírás: Bokaortézis oldalsó kivehető stabilizáló elemekkel és 8-as kötést biztosító pólyával. Kétoldali.

Javallat - Rendeltetésészerű felhasználás:

Enyhé és mérsékelt bokaícam, továbbá a boka íngyuladása, ízületi traumája és zúzódása, krónikus és műtét utáni ízületi, artrózis és ízületi gyulladás, valamint instabilitása kezelésére.

Ellenjavallatok:

- Duzzanatalt járó hegkekre ne használja.
- Ne használja, ha az ortézis helye elfertőződött.
- Biokompatibilis anyagokkal való érintkezés okozta bőrállergia esetén ne használja.
- Ha a bőrfelület elkezd pirosodni és/vagy túlzottan felmelegszik, hagyja abba az eszköz használatát.

Övintézkedés:

- Az ortézis használatát előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Ha kérdése merül fel, keresse fel orvosát vagy az intézményt, ahol az eszközt vásárolta.
- Ahhoz, hogy az ortézis el tudja látni funkcióját, megfelelően a beteg alkotható kell igazítani. Az ortézis első felhelyezését és beállítását szakember (orvos, ortopédiai technikus stb.) felügyelete alatt kell végezni.
- Mindig tartsa be az általános használati utasításokat és kezelőorvosa külön utasításait.
- Az ortézis felírására és használatának utánkövetésére az orvos jogosult, és a kezelés időtartamáról is ő dönt.
- Ha bármilyen mellékhatás, bőrréakciókt vagy szenzibilizációt észlel, erről azonnal tájékoztassa orvosát.
- Az orvosnak figyelembe kell venni a helyi használatú krémek esetleges használatát az ortézis használatá mellett.
- A nyomás által érintett területeken a bőr nem lehet sérült, sem túlérzékeny.
- Bár az ortézis nem egyszeri használatra való, csak egy páciens használhatja. Más pácienseken használni nem szabad.
- Az ortézis megfelelő használatá függ az alkotóelemeinek állapotától, ezért ezeket rendszeresen ellenőrizni kell. A páciens kezelését nyomom követő egészségügyi dolgozó a páciens részére jelölheti a termék alkalmasságát vagy javasolhatja annak lecserélését, ha a termék megromlottodott vagy elkopott.
- A működőképesség megőrzése érdekében ajánlott ügyelni a mikrokapocs gyors záróelemeinek tisztaságára, és a hozzá tapadt anyagokat célzerű eltávolítani.
- Rendszeresen tisztítsa meg a terméket és ügyeljen a megfelelő személyi higiéniára.
- Kérdezze meg orvosát, hogy az ortézis levehető-e fürdés vagy zuhanyozás közben, ha nem, fedje le vagy védje a víztől az ortézist.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az eszközzel.

Utasítások a helyes felhelyezésre vonatkozóan:

- Nagyon fontos, hogy a beteg számára megfelelő méretet válasszunk.
- Helyezze a tokokat az oldaláskékre (1. ábra).
- Nyissa ki a tépőzárát, majd helyezze a lábféjet az ortézisbe oly módon, hogy a sarok a lyukra kerüljön. (2. ábra)
- Igazítsa el, és a lábféjen zárja be az alsó tépőzárát (3. ábra)
- Igazítsa el, majd zárja be a felső tépőzárakat. (4. ábra)
- Végezzen „8”-as kötést a bokán, szorítás nélkül rögzítse a pólya végét (5. ábra), húzza meg (6. ábra), majd a kívánt szorosságot biztosítva az ellenkező oldalon zárja be a pólyát (7. ábra).

A termék karbantatása – Mossási utasítások:

A termék nem tartalmaz latexet. Mossás előtt zárja be a mikrokapcsokat. Semleges mosószerrel, maximum 30°C-on mossa kezülle a vegytisztítást. Ne vasalja. Hypót ne használjon. Szárítógépben ne szárítsa. Közvetlen hőforrásnak, például kályha, fűtés vagy radiátor melegének és közvetlen napfélinek ne tegye ki.

A stabilizáló elemeket mosás előtt vegye ki, nedves ronggyal tisztítsa meg, és törölje szárazra.

Megjegyzés: A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és az illetékes hatóságnak abban a tagállamban, ahol a felhasználó és/ vagy a páciens él.

NL

Beschrijving:

Ankelortóse met uitneembare stabilisatoren aan de zijkant en een 8-bandage. Beide kanten.

Aanwijzingen-Bedoeld gebruik:

Aangewezen voor de behandeling van licht tot matige enkelverstuikingen, enkelpesontstekingen, letsels, kneuzingen, gewrichtsuiwvoelingen, chronische irritatie, postoperaties, osteoartritis, enkelartritis en instabiliteit.

Contra-indicaties:

- Niet op gezwollen open littekens gebruiken.
- Gebruik de orthese niet op plekken die geïnfecteerd zijn.
- Niet gebruiken in geval van huidaallergieën wegens het contact met weefselvriendelijke materialen.
- Niet gebruiken als het gebied te rood en/of te warm wordt.

Voorzorgsmaatregelen:

- Aan de zorgverlener deze instructies voordat u de orthese gebruikt. Raadpleeg bij twijfel of vragen uw arts of de leverancier die u de orthese heeft verstrekt.
- Zodat de orthese voor het juiste doel kan zorgen moet deze zich goed aan de morfologie van de patiënt aanpassen. De eerste keer dat u deze orthese gebruikt, moet u dit door een specialist laten plaatsen (arts, orthopedist, enz.).
- Volg altijd de algemene gebruiksaanwijzing en eventuele speciale instructies die uw behandelend arts of zorgverlener heeft voorgeschreven.
- De zorgverlener dient een persoon te zijn die bevoegd is om een behandeling en de duur ervan te bepalen, voor te schrijven en op te volgen.
- Als u een nevenwerking of een huidaandoening of -irritatie opmerkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw zorgverlener.
- De zorgverlener moet rekening houden met het mogelijke gebruik van crèmes in combinatie met de orthese.
- Zones waarop druk wordt uitgeoefend mogen niet verwond of overgevoelig zijn.
- De orthese is niet bedoeld voor eenmalig gebruik maar wel voor één enkele patiënt. Gebruik de orthese nooit op andere patiënten.
- De efficiëntie van de orthese hangt af van de toestand van de onderdelen; controleer ze daarom regelmatig. Wanneer de orthese versleten of in slechte toestand is, zal de zorgverlener die de behandeling van de patiënt opvolgt beslissen of het product al dan niet moet worden vervangen.
- Om de werking van het klittenband te behouden, is het raadzaam om de micro-haakjes schoon te houden en alle aanwezige materiaal te verwijderen.
- Maak regelmatig de orthese schoon en volg goede hygiënische praktijken.
- Raadpleeg uw arts of de orthese tijdens het baden of douchen kan worden verwijderd, zo niet, bedek of bescherm de orthese tegen water.
- Laat kinderen niet met de orthese spelen.

Instructies voor een correcte plaatsing:

- Nagyon fontos, hogy a beteg számára megfelelő méretet válasszunk.
- De schalen in de zijvakjes voeren (Fig. 1)
- De klittenbandsluitingen openen en de voet met de hiel op de opening plaatsen. (Fig. 2)
- Goed aanpassen en het onderste klittenband op de voetwreef sluiten (Fig. 3)
- Bovenste sluitingen aanpassen en het klittenband sluiten. (Fig. 4)
- Een 8-bandage over de enkel aanbrengen, een uiteinde zonder kracht vastmaken (Fig. 5), om de enkel heen halen en trekken (Fig. 6) en aan de overzijde met de gevaste strakheidsluiting (Fig. 7).

Onderhoud van het product - wasinstructies:

Dit product bevat geen latex. Alle microhaakjes vóór het wassen sluiten. Met milde zeep wassen, max. 30°C. Niet chemisch reinigen. Niet strijken. Niet bleken. Niet in de droogtrommel. Niet blootstellen aan directe warmtebronnen zoals kachels, verwarmingen, radiatoren, direct zonlicht, enz.

Verwijder de stabilisatoren voordat u de orthese wast, reinig deze met een vochtig doek en droog het.

Opmerking: Ernstige bijzonderheden in verband met het gebruik van het product moeten worden vermeld aan de fabrikant en de bevoegde raad van het lidstaat waar de gebruiker y/of patiënt verblijft.

PL

Opis:

Orteza stawu skokowego typu ósemka ze stabilizacją boczną. Obustronna.

Wskazania i przewidziane zastosowanie:

Zwichnięcia stawu skokowego lekkie i umiarkowane, zapalenie ścięgna, urazy, kontuzje z wywletem dostawowym, przewlekłe podrażnienie, leczenie pooperacyjne, choroba zwyrodnieniowa i zapalenie stawu skokowego oraz jego niestabilność.

Przeciwwskazania:

- Przeciwwskazaniem do użytkowania ortozy jest blizna z obrzękiem.
- Niedozwolone jest zakładanie ortozy w miejscu zakazonym.
- Orteza nie powinna być używana w razie stwierdzenia alergii skórných wywołanych kontaktem z materiałami biokompatybilnymi.
- Należy zaprzestać użytkowania ortozy, gdyby pojawiło się zaczerwienie i/lub podwyższona miejscowo temperatura.

Zalecenia:

- Przed prząpieniem do użytkowania ortezę należy uważnie przeczytać niniejsze zalecenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultować się z lekarzem lub prawnym specjalistą, w którym ją nabyto.
- W celu zapewnienia skutecznego działania produktu, powinien on zostać odpowiednio dopasowany do budowy anatomicznej pacjenta. Wymagane jest, aby po raz pierwszy założenie i dopasowanie ortezy odbywało się pod nadzorem wykwalifikowanego personelu (lekarza, technika ortopedycznego itp.).
- Ogólne zalecenia dotyczące użytkowania oraz szczegółowe wskazania lekarza specjalisty powinny być zawsze przestrzegane.
- Decyzję w sprawie zlecenia i czasu stosowania ortezy oraz oceny postępów leczenia podejmuje lekarz.
- W razie wystąpienia skutków ubocznych, zmian skórných lub reakcji uczuciowych, należy zgłosić je lekarzowi.
- Istotne jest wykluczenie przez lekarza możliwości używania kremów przeznaczonych do stosowania miejscowego podczas korzystania z ortezy.
- Skóra nie powinna być uszkodzona ani nadrażniona w miejscach narażonych na

- Opaska przeznaczona jest wyłącznie dla jednej osoby i nie powinna być ponownie stosowana w odniesieniu do innych pacjentów.
- Należy systematycznie kontrolować, w jakim stanie znajdują się wchodzące w skład ortezy elementy, od nich bowiem zależy jej prawidłowe działanie. Kontrolujący postępy leczenia personel medyczny może poinformować pacjenta, że stosowany przez niego produkt nadaje się do użytku lub wskazana jest jego wymiana ze względu na ewentualne uszkodzenie lub zużycie.
- Zalecane jest utrzymywanie zapięć micro-velcro w należytęj czystości, zapewnienie ich odpowiedniego działania, co wymaga usuwania wszelkich rodzajów przyczepionych do nich zanieczyszczeń.
- Należy regularnie czyścić ortezę i dbać o właściwą higienę osobistą.
- Należy zapytać lekarza, czy można zdjąć ortezę podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- W przypadku gdyby nie było to możliwe, należy odpowiednio ją zakryć i zabezpieczyć przed działaniem wody.
- W żadnym wypadku nie powinny się nią bawić dzieci.

Zalecenia dotyczące prawidłowego dopasowania:

- Należy pamiętać, że nie należy odpowiednio dla danego pacjenta rozmiar.
- Umieszczamy wkładki stabilizujące w bocznych kieszeniach (Rys. 1).
- Otwieramy zapięcia rzepowe i wsuwamy stopę, umieszczając piętę w przeznaczonym na nią otworze (Rys. 2).
- Dopasowujemy i zapinamy dolny rzep na wysokości podbicia (Rys. 3).
- Po odpowiednim wyregulowaniu górnych zapięć, przycmowujemy ich rzepy (Rys. 4).
- Zgodnie z techniką bandażowania w ósemkę, dokonujemy przycmowwania jednego końcówki taśmy bez jej naprężania (Rys. 5), oświadmy drugą wokół stawu skokowego, odpowiednią ją naciągając (Rys. 6), i zapinamy po przeciwnej stronie, zapewniając przy tym żądane naprężenie (Rys. 7).

Pielęgnacja produktu - zalecenia dotyczące czyszczenia:

Niniejszy produkt nie zawiera lateksu. Przed praniem zamknij wszystkie zapięcia micro-velcro. Prac z użyciem obojętnego detergentu na bazie mydła (maks. 30°C). Nie używaj chemii. Nie prasować. Nie stosować wybielaczy. Nie suszyć w suszarnie bębnowej. Nie należy wystawiać ortezy na bezpośrednie działanie źródeł ciepła (piekcyków, grzejników, kaloryferów, promieniowania słonecznego itp.). Przed praniem usunąć wkładki stabilizujące, które należy wyczyścić wilgotną szmatką i wysuszyć.

Uwaga: O wszelkich poważnych zdarzeniach związanych z produktami należy poinformować ich producenta i stosowny organ państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent.

RO

Descriere:

Orteza pentru gleznă cu stabilizatoare laterale detaşabile şi bandaj în 8. Bilaterală.

Indicaţii - Utilizare prevăzută:

Indicaţi în caz de entorsă uşoară şi moderată a gleznei, tendinţă la gleznă, traumatisma, contuzie, revărsat articular, iritaţi cronice, postoperator, osteoartrită, artrită la gleznă şi instabilitate.

Contraindicaţii:

- A nu se folosi pe piele cu răni deschise sau inflamată.
- A nu se folosi în cazul în care zona în care trebuie aplicată orteza este infectată.
- A nu se folosi în caz de alergii cutanate la contactul cu materiale biocompatibile.
- Întrerupeţi folosirea dacă zona începe să se înroşească şi/sau să se încălzească puternic.

Precautii:

- Ţiţiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni înainte de folosirea ortezei. Pentru orice neînţelegere consultaţi medicul sau personalul din magazinul de la care l-aţi cumpărat.
- Pentru ca orteza să poată acţiona, trebuie să se adapteze la morfologia pacientului. Prima montare şi adaptare a acestor accesorii trebuie efectuată sub supravegherea personalului calificat (medic, tehnician ortoped etc.).
- Respectaţi întotdeauna aceste instrucţiuni de utilizare generale şi indicaţiile personale date de medic.
- Tratamentul poate fi prescris numai de un doctor, care va stabili durata acesteia şi controalele necesare.
- Deşi orteza nu trebuie să fie unică folosinţă, este destinată unei singure persoane. A nu se folosi pentru alţi pacienţi.
- Buna folosire a ortezei depinde de starea componentelor acesteia, de aceea trebuie verificată periodic. Personalul sanitar care se ocupă cu controlul pacientului îi poate indica acestuia dacă produsul este în bună stare sau trebuie înlocuit, în cazul deteriorării sau uzurii.
- Se recomandă curăţarea sistemului de închidere rapidă cu arici pentru păstrarea proprietăţilor de închidere, îndepărtând materialele rămase lipite de acesta.
- Curăţaţi periodic produsul şi menţineţi igiena personală.
- Întrabaţi medicul dacă vă puteţi scoate orteza pentru a face duş sau baie, iar dacă nu, acoperiţi sau protejaţi orteza de apă.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Instrucţiuni pentru aplicarea corectă:

Este esenţial să se aleagă mărimea adecvată pentru pacient.

- Introduceţi valvele în buzunarele laterale (Fig. 1).
- Deschideţi aricii şi introduceţi lalela piciorului astfel încât călcăiul să fie poziţionat în deschiderea prevăzută în acest scop (Fig. 2).
- Ajustaţi şi închideţi ariciul de jos pe faţa piciorului (Fig. 3).
- Ajustaţi închiderile de sus şi închideţi aricii (Fig. 4).
- Înfăşuraţi bandajul în „8” pe gleznă, fixaţi capătul neîntins (Fig. 5), trageţi pentru a înfăşura pe lângă câlcăi (Fig. 6) şi închideţi în partea opusă după ce aţi obţinut compresia dorită (Fig. 7).

Întreţinerea produsului - Instrucţiuni de spălare:

Acest produs nu conţine latex. Înainte de a spăla produsul închideţi toţi aricii. Spălaţi cu detergent neutru, la maximum 30°C. Nu spălaţi uscat. Nu călcaţi. Nu folosiţi înălbitori. Nu uşaţi în uscător. Nu expuneţi la surse directe de căldură, cum ar fi sobe, calorifere, radiatoare, surse solare directe etc.

Înainte de spălare scoateţi elementele de stabilizare, curăţaţi-le cu o cârpă umedă şi uşaţi-le.

Notă: Orice incident grav în legătură cu produsul trebuie comunicat producătorului şi autorităţii naţionale competente din ţara membră a CE în care îşi au reşedinţa utilizatorul şi pacientul.

SK

Popis:

Ortēza členka s odnímateľnými bočnými stabilizátormi a bandážou v tvare „8“. Obojstranná.

Indikácie - účel použitia:

Indikovaný na liečbu miernych a stredne ťažkých podvrtnutí členka, zápalov šliach členka, úrazov, poranení, klbových výpotkov, chronického podráždenia, pooperačných stavov, osteoartrózy, artrózy členka a nestability.

Kontraindikácie:

- Nepoužívajte na otvorené jazvy s opuchom.
- Nepoužívajte, ak je oblasť, kde je ortēza umiestnená, infikovaná.
- Nepoužívajte v prípade kožných alergií v ôsleďku kontaktu s biokompatibilnými materiálmi.
- Prestajte používať, ak oblasť začne červenať a/alebo akumuluje nadmerné teplo.

Opatrenia:

- Prí pad použítim ortēzy si pozorne prečítajte tieto pokyny. Ak máte nejaké otázky, poraďte sa so svojím lekárom alebo so zariadením, kde ste zdravotnícku pomôcku zakúpili.
- Aby ortēza plnila svoju funkciu, musí byť správne nastavená na morfológiu pacienta. Prvé nasadenie a nastavenie ortēzy musí prebiehať pod dohľadom kvalifikovaného personálu (lekár, ortopedický technik a pod.).
- Vždy dodržiavajte všeobecné pokyny na použitie a osobitné indikácie, ktoré vám predpísal lekár.
- Lekár je osoba kvalifikovaná predpisovať a rozhodovať o trvaní liečby, ako aj o jej sledovaní.
- Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, stav kože alebo senzibilizáciu, okamžite informujte svojho lekára.
- Lekár musí brať do úvahy možné použitie topických krémov spolu s použitím ortēzy.
- V tlakových oblastiach nesmie byť koža poranená ani precitlivená.
- Hoci ortēza nie je na jedno použitie, je určená len pre jedného pacienta. Iní pacienti túto ortēzu nesmú znovu používať.
- Správne použitie ortēzy závisí od stavu prvkov, ktoré ju tvoria a preto musí byť pravidelne kontrolovaná. Zdravotnícky personál sledujúci liečbu pacienta môže pacientovi odporučiť, či produkt vhodný alebo je potrebné ho v prípade, že je ortēza poškodená alebo opotrebovaná, vymeniť.
- Je vhodné dbať o čistotu suchých zipsov, aby sa zachovala ich funkčnosť, eliminujte materiály, ktoré by na sa k nim mohli nalepiť.
- Výrobok pravidelne čistite a udržiavajte správnu osobnú hygienu.
- Poraďte sa so svojím lekárom, či je možné počas kúpania alebo sprchovania ortēzu odstrániť. Ak nie, ortēzu prikryte alebo chráňte pred vodou.
- Nedovoľte deťom sa hrať s touto zdravotníckou pomôckou.

Pokyny na správne použitie:


- Výber správnej veľkosti pre pacienta je veľmi dôležitý.
- Vložte chlópne do bočných vreciek (Obr. 1).
- Otvorte suché zipsy a vložte chodidlo tak, že pätu umiestnite nad otvor (Obr. 2).
- Nastavte a zatvorte spodný suchý zips cez priehlavok (Obr. 3).
- Upravte horné upevňovacie prvky, zatvorte suchý zips (Obr. 4).
- Spravte z bandáže cez členok tvar „8“, uvoľnite koniec bez napätia (Obr. 5), stiahnite okolo členka (Obr. 6) a uzavrite na opačnej strane, čím dosiahnete požadované napätie (Obr. 7).

Údržba produktu - Návod na čistenie:

Tento výrobok neobsahuje latex. Pred práním zatvorte všetky suché zipsy. Umyvajte neutrálnym mydlom s maximálnou teplotou 30°C. Nečistite chemicky. Nežehliť. Nepoužívajte bieliadlo. Neusušte v bubnovej sušičke. Nevystavujte ortēzu priamym zdrojom tepla, ako sú kachle, ohrievače, radiátory, priame vystavenie slnku, atď. Pred práním odstráňte stabilizátory, utrite ich vlhkou handričkou a osušte.

Poznámka: Akákoľvek vážna nehoda súvisiaca s výrobkom musí byť nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom používateľ a/alebo pacient žije.

ATX820

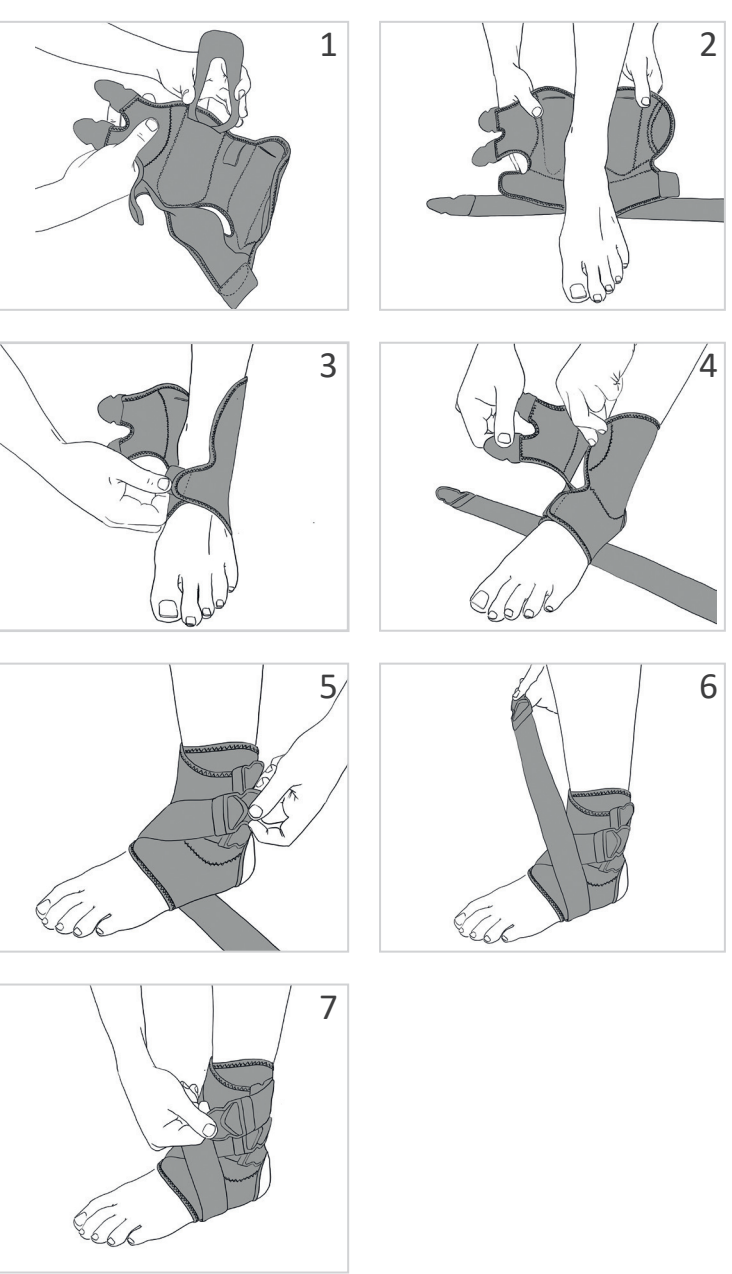

IT

Descrizione:

Cavigliera con stabilizzatori laterali rimovibili e bendaggio a 8. Bilaterale.

Indicazioni- uso previsto:

Indicata per il trattamento di lievi e moderate distorsioni della caviglia, tendinite della caviglia, trauma, contusione, versamento articolare, irritazione cronica, trattamento postoperatorio, artrosi, artrite della caviglia e instabilità.

Contraindicazioni:

- Non usare su cicatrici aperte con gonfiore.
- Non usare se l'area in cui è posizionata l'ortesi è infetta.
- Non usare in caso di allergie cutanee dovute al contatto con materiali biocompatibili.
- Smettere di usare se l'area inizia ad arrossirsi e/o accumula calore eccessivo.

Precauzioni:

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'ortesi. In caso di dubbi, consultare il proprio medico o il rivenditore.
- Per ottenere il massimo beneficio, l'ortesi deve essere correttamente adattata alla morfologia del paziente. Il primo posizionamento e regolazione dell'ortesi deve essere effettuato sotto la supervisione di personale qualificato (medico, tecnico ortopedico, ecc.).
- Rispettare sempre le istruzioni per l'uso generali e le indicazioni specifiche prescritte dal medico.
- Il medico è la persona che ha le competenze per prescrivere e stabilire la durata del trattamento e la sua prosecuzione.
- Se si notano effetti collaterali, affezioni cutanee o fenomeni di sensibilizzazione, informare immediatamente il medico.
- Il medico deve considerare il possibile uso di creme per uso topico, unitamente all'uso dell'ortesi.
- Nelle zone di pressione, la pelle non deve essere lesionata né ipersensibile.
- Anche se l'ortesi non è monouso, deve essere utilizzata da un solo paziente. Non riutilizzare su altri pazienti.
- L'uso corretto dell'ortesi dipende dalla condizione degli elementi che la costituiscono e quindi deve essere controllata con frequenza. Il personale sanitario che segue del trattamento del paziente può indicare allo stesso l'idoneità del prodotto o una sua eventuale sostituzione, se il prodotto si è deteriorato o usurato.
- Si consiglia di curare la pulizia delle chiusure rapide con micrograni per conservarne la funzionalità, eliminando i materiali che potrebbero esservi rimasti attaccati.
- Pulire periodicamente il prodotto e mantenere una corretta igiene personale.
- Consultare il proprio medico per sapere se l'ortesi può essere rimossa durante il bagno o la doccia; in caso contrario coprirlo o proteggerla dall'acqua.
- Non permettere ai bambini di giocare con questo dispositivo.

Istruzioni per un uso corretto:

- È fondamentale scegliere la taglia giusta per il paziente.
- Inserire le valve negli inserti laterali (Fig. 1).
- Aprire le chiusure in velcro e inserire il piede posizionando il tallone sopra il foro (Fig. 2).
- Regolare e chiudere il velcro inferiore sopra la tomaia (Fig. 3).
- Regolare le chiusure superiori, e chiudere i velcri (Fig. 4).
- Esequire il bendaggio a "8" sulla caviglia, ancorare l'estremità senza tensione (Fig. 5), avvolgere la caviglia tirando (Fig. 6), e chiudere sul lato opposto dando la tensione desiderata (Fig. 7).

Mantenimento del prodotto - Istruzioni di lavaggio:

Questo prodotto non contiene lattice. Prima di lavare, chiudere tutte le chiusure in velcro. Lavare con sapone neutro massimo a 30°C. Non lavare a secco. Non stritare. Non utilizzare candeggina. Non asciugare nell'asciugatrice. Non esporre a fonti di calore dirette come stufe, caloriferi, radiatori, raggi solari diretti, ecc.

Rimuovere le articolazioni prima del lavaggio, pulire con un panno umido e asciugare.

Nota: Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere comunicato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono l'utente e/o il paziente.

PT

Descrição:

Ortótise do tornozelo com estabilizadores laterais extraíveis e bandagem em 8. Bilateral.

Indicações - utilização prevista:

Indicada para o tratamento de entorse do tornozelo ligeira e moderada, tendinite do joelho, traumatismo, contusão, derrame articular, irritação crônica, pós-operatório, artrose, artrite do tornozelo e instabilidade.

Contraindicações:

- Não utilizar em cicatrizes abertas com tumefação.
- Não utilizar se a zona de aplicação da ortótise estiver infetada.
- Não utilizar em caso de alergias cutâneas por contacto com os materiais biocompatíveis.
- Deixar de utilizar se a zona começar a avermelhar-se e/ou acumular demasiado calor.

Precauções:

- Le atentamente estas instruções antes de utilizar a ortótise. Se tiver alguma dúvida, consulte o seu médico ou o estabelecimento onde tiver adquirido o produto.
- Para que a ortótise possa desempenhar a sua função, deve ser ajustada corretamente à morfologia do doente. A primeira colocação e regulação da ortótise deve ser realizada sob a supervisão de pessoal qualificado (médico, técnico ortopédico, etc.).
- Respeite sempre as instruções de utilização gerais e as indicações particulares para cada produto.
- O médico é a pessoa qualificada para prescrever e determinar a duração do tratamento, bem como para realizar o seu acompanhamento.
- Se detetar algum efeito secundário, afecção cutânea ou sensibilização, deve comunicá-lo imediatamente ao médico.
- O médico deve considerar a eventual utilização de cremes tópicos, juntamente com a ortótise.
- Nas zonas de pressão, a pele não deve estar lesionada, nem ser hipersensível.
- Apesar de a ortótise não ser de utilização única, destina-se a um único doente. Não utilizar em outros doentes.
- A boa utilização da ortótise depende do estado dos seus componentes e, portanto, deve ser inspecionada periodicamente. O pessoal de saúde que acompanhar o tratamento do doente pode indicar-lhe a idoneidade do produto ou a conveniência da sua substituição, se estiver deteriorado ou gasto.
- Deve limpar cuidadosamente os fechos rápidos de velcro para conservar a sua funcionalidade, eliminando os materiais que possam ter aderido aos mesmos.
- Limpe periodicamente o produto e mantenha uma higiene pessoal correta.
- Consulte ao seu médico se pode retirar a ortótise durante o banho ou o duche; se não, cubra-o com uma toalha.
- Não deixe que as crianças brinquem com este dispositivo.

Istruções para uma colocação correta:

- A escolha do tamanho adequado para o doente é fundamental.
- Introduzir valvas nos bolsos laterais (Fig. 1).
- Abri os fechos de velcro e introduzir o pé, colocando o calcanhar sobre a abertura (Fig. 2).
- Ajustar e apertar o velcro inferior sobre a gásepa (Fig. 3).
- Ajustar os fechos superiores, apertar os velcros (Fig. 4).
- Realizar o bandagem em "8" sobre o tornozelo, fixar a extremidade sem tensão (Fig. 5), contornar o tornozelo tracionando (Fig. 6) e apertar no lado contrário com a tensão pretendida (Fig. 7).

Mantenção do produto - Instruções de lavagem:

Este produto não contém látex. Antes de lavar, apertar todos os velcros. Lavar com um detergente neutro a uma temperatura máxima de 30°C. Não lavar a seco. Não passar a ferro. Não usar lixívia. Não secar na máquina de secar roupa. Não expor a fontes de calor diretas como salamandras, aquecedores, radiadores, luz solar direta, etc.

Remover as estabilizadores antes da lavagem e limpá-los com um pano húmido e seco.

Nota: Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro no qual se encontrem o utilizador e/ou o paciente.

RU

Описание:

Голеностопный бандаж со съёмными боковыми стабилизаторами и ремённой застёжкой в виде «8». Двусторонний.

Показания к применению:

Применяется для лечения легкого и умеренного растяжения связок, тендинита голеностопного сустава, травмы, ушиба, суставного выпота, хронического, послеоперационного раздражения, остеоартрита, артрита голеностопного сустава и нестабильности положения.

Противопоказания:

- Не используйте при открытых ранах с отеком.
- Не используйте при воспалении поврежденной области.
- Не используйте при кожной аллергии из