

**traction**  
system

*Máximo control*

 PRIM

# **Humerux**

*Ortesis de húmero*





# Humerux

Ortesis de húmero



**HUMERUX** es una nueva ortesis que ofrece el máximo control en las lesiones de húmero, gracias a su innovador sistema de tracción.

Indicada para el tratamiento de las fracturas diafisarias de húmero, tratamiento post-quirúrgico de las fracturas y control de la inestabilidad del foco de fracturas durante el proceso de consolidación.




## Y traction system

▲ **Sistema Y-traction, mediante galápago de tracción**, que permite incrementar y ajustar la tensión: ayuda a maximizar el control sobre la alineación, fijación e inmovilización del húmero.

▲ **Tejido técnico acolchado y transpirable:** confortable y respetuoso con la piel.

100% LATEX FREE ✓

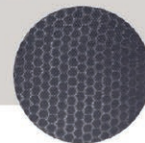

▲ **Valvas y cinchas estabilizan el húmero** aplicando una compresión uniforme y personalizada a los tejidos blandos circundantes.

▲ **Estructura bivalva con placas termoconformadas** de PE de alta densidad, extraíbles: pueden conformarse mediante calor\* para su adaptación anatómica al paciente.

\*Las valvas pueden conformarse con pistola de calor a 150 grados a unos 15 cm. de distancia.



▲ **Cincha pectoral:** impide que la ortesis se deslice hacia abajo. Incorpora un soporte almohadillado que se adapta cómodamente a la axila evitando cualquier tipo de roce o molestia.

▲ **Sistema de fijación mediante 3 cinchas humerales,** enhebradas en 3 hebillas mariposa con cierre micrograncho y tope ancla: aseguran un ajuste fácil, cómodo y seguro.

# Humerux


Ortesis de húmero

Máximo control



EVOH300

Tallas

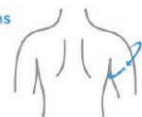

**S** 18-26 cm  
**M** 26-34 cm  
**L** 34-42 cm  
**XL** 42-50 cm

Bilateral / Rango (contorno parte superior del brazo)