



# Ortesis antebraquial

Férula de antebrazo para tratamiento funcional

PSL150

## Ortesis Bivalva

de termoplástico moldeado, unida por cinchas con pasadores-guía para un ajuste preciso. *Parte superior* conformada para la limitación de la flexión dorsal de la muñeca.



## Forro interior

acolchado en plastazote para favorecer el confort.




## Tubular de algodón

100% evita lesiones que se pudieran producir entre las valvas



## Cinchas de ajuste

en velour de tacto agradable con la piel. Terminadas en microvelcro con cierres cocodrilo que permiten personalizar el ajuste de manera segura.

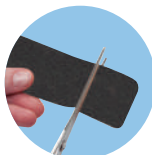

1º. Cortar cincha



2º. Incorporar al cierre



### Tallas y toma de medidas

Talla	Contorno	Longitud
S	20 - 24 cm	27,5 cm
M	24 - 28 cm	29 cm
L	28 - 32 cm	30,5 cm
XL	32 - 36 cm	32 cm

Guarda lado

100% LATEX FREE ✓

Indicada para fracturas de antebrazo, postoperatorio.